




OCCLU® SPRAY PLUS

Okklusionsspray, grün
Occlusion spray, green
Spray d'occlusion, vert



D Occlu Spray Plus markiert die Okklusionsfläche mit einer feinen Mikropulverschicht. Vor Gebrauch schütteln und dann aus einer Entfernung von ca. 3 cm auf das Objekt sprühen. Bei Kunststoff, Komposit etc. auf den Antagonisten applizieren; bei Metall, Gold oder Amalgam direkt aufsprühen. Zum Sichtbarmachen von Kontaktpunkten in Kronen und Brücken hineinbringen. Leicht mit Wasser entfernbar. Verwendung nur in der professionellen Zahnarztpraxis und im zahntechnischen Labor. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Kühl aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

GB Occlu Spray Plus marks the occlusal surface with a superfine layer of micro powder. Shake and spray from a distance of 2.5 – 3 cm (1 inch). Composite, acrylic or porcelain: spray onto the antagonist; cast metal, gold or amalgam: spray directly onto the surface. In order to visualize contact points, spray directly into crowns and bridges. Can be easily removed with water. Must only be used in dental surgeries and dental laboratories.

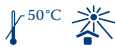

75 ml e

110 3

Made in Germany

Pressurized container. protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50 °C. Do not pierce or burn, even after use. Do not spray on a naked flame or any incandescent material. Buildup of explosive mixtures possible without sufficient ventilation. Keep away from sources of ignition – No smoking. Keep in a cool place. Keep out of the reach of children. Use only in well-ventilated areas. In case of fire, use sand, carbon dioxide or powdered extinguishing agent. Never use water. Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

F Occlu Spray Plus localise les points de contact sur le modèle grâce à un film ultrafin. Agiter avant l'emploi. Appliquer directement sur or et amalgame. Pour marquer résine, email et composite, sur les parties opposées. Appliquer le spray dans la couronne ou sur le modèle, de sorte que les points de contact soient aussitôt visibles. Rincer à l'eau simplement. N'utiliser qu'au cabinet dentaire et laboratoire prothésiste professionnel. Récipient sous pression. Protéger des rayons du soleil et des températures supérieures à 50 °C. Ne pas ouvrir par la force ou brûler après usage. Ne pas vaporiser en direction d'une flamme ou d'un objet incandescent. Formation de mélanges explosifs en cas d'utilisation sans aération suffisante. Conserver à l'écart de sources de chaleur. Ne pas fumer. Conserver au frais, et hors de la portée des enfants. N'utiliser que dans des espaces bien aérés. Pour éteindre, utiliser sable, dioxyde de carbone ou extincteur en poudre, jamais avec de l'eau. Nocif pour les organismes aquatiques, peut avoir des effets nocifs à long terme dans les eaux.



Gefahr / Danger

Extrem entzündbares Aerosol. / Extremely flammable aerosol. / Aerosol extrêmement inflammable.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. / May cause drowsiness or dizziness. / Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. / Harmful to aquatic life with long lasting effects. / Nocif pour les organismes aquatiques, avec effets néfastes à long terme.

REF 554 205

HÄGER & WERKEN GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg, Germany

T +49 (203) 99 26 9-0
F +49 (203) 29 92 83

www.hagerwerken.de

