



Occluform-3: Anwendung


Positionierung des Arretiergelenks

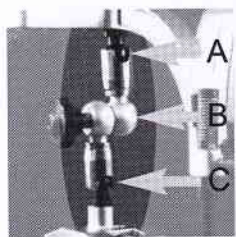

1. Bitte öffnen Sie das Arretiergelenk (B) und richten Sie A, B und C wie abgebildet aus.

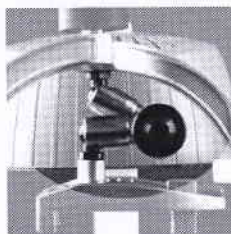


2. Jetzt können Sie die obere Modellplatte in die höchste Stellung bringen.

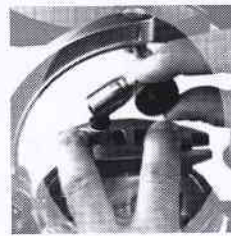


3. Dies ist die beste Ausgangsstellung, um die Modelle zu artikulieren.

Aufgrund der einem modernen Mittelwertartikulator entsprechenden Maße erlaubt der Occluform-3 eine mittelwertige Anhebung des Bisses. Steht ein im Mund oder im volladjustierbaren Artikulator genommener Konstruktionsbiss zur Verfügung, werden die Modelle mit diesem im Occluform-3 artikuliert. Eine Markierungslinie am Stützstift entspricht ca. 1 mm Bisserrhöhung am Inzisalpunkt.


Einprägung des Gegenbisses zur Herstellung einer adjustierten Schiene

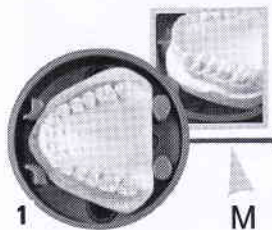

1. Das zu versorgende Modell im Modelltopf einspannen (Inbusschlüssel, M). Es kann sinnvoll sein, das Modell schräg einzuspannen (z.B. bei starken Unterschnitten).

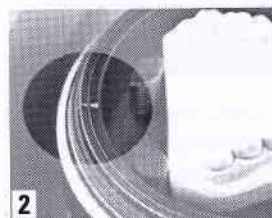


2. Den Modelltopf mit dem Modell in den Gerätetopf einsetzen. Wenn die Markierungspunkte gegenüber liegen, rastet der Modelltopf in der Zentrierplatte ein.

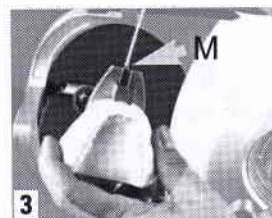


3. Das Gegenkiefermodell in die obere Modellplatte einspannen.



4. Befindet sich das OK-Modell im Modelltopf, mit der Gelenkschraube (linker Pfeil) **das obere Gelenk** der Gelenksäule sperren (wie abgebildet). Befindet sich das UK-Modell im Modelltopf, **das untere Gelenk** sperren. Zur Artikulation muss das Arretiergelenk frei beweglich sein, die Modellplatte mit dem Modell halten und den Okkludierbügel schließen, bis der Stützstift aufsitzt. Der Stützstift steht dabei auf der breiten 0-Markierungslinie (Abb.). Die Modelle artikulieren.

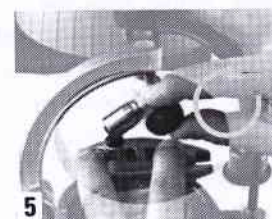

5. Die obere Modellplatte festhalten und das Arretiergelenk fixieren.

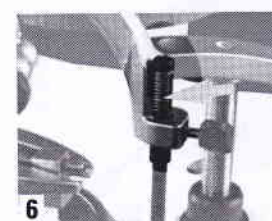

6. Steht kein Konstruktionsbiss zur Verfügung, kann der Biss mit dem Stützstift angehoben werden. Eine Markierungslinie am Stützstift entspricht ca. 1 mm Bisserrhöhung am Inzisalpunkt. Okkludierbügel mit dem fixierten Gegenkiefermodell wieder öffnen.


7. Den Modelltopf mit Edelstahlgranulat auffüllen (der Modelltopf kann dazu auch entnommen werden).




8. Das Granulat ggf. auch unter das Modell schieben und gut verdichten.



9. Die Modelle mit farbloser Isolierung (Isolac, 624 050) isolieren (nur bei Verwendung weicher Folien, z.B. Erkoflex). Jetzt der Erkoform-3d Gerätebeschreibung entsprechend tiefziehen.

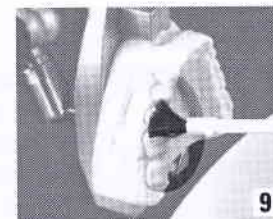

10. Danach **sofort** den Okkludierbügel bis zum Anschlag des Stützstifts schließen, dabei liegt die Hand auf dem Anpressknopf.

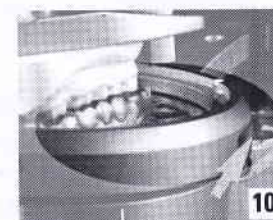

11. Der Gegenbiss ist eingepreßt. Komplet abkühlen lassen und den Bügel öffnen.



12. Die Folienaufnahme des Geräts anheben, dabei hebt sich der Modelltopf mit an. Diesen halten, den Folienspannring öffnen und den Modelltopf mit der Folie entnehmen.

