



Überzeugend
stabile Struktur

everX Flow™
von GC

Mit kurzen Glasfasern
verstärktes fließfähiges
Composite für
den Dentinersatz

GC

everX Flow von GC

Überzeugend stabile Struktur


Entdecken Sie **everX Flow**, ein mit kurzen Glasfasern verstärktes fließfähiges Composite, für den **Dentinersatz und Verstärkung von Restaurationen**. Ähnlich wie bei Eisenstahl im Bauwesen verstärken die Glasfasern in everX Flow Restaurationen und **verhindern Risse**.

Mit seiner einfachen Anwendung, zwei erhältlichen Farbtönen und seiner unglaublichen Stabilität wird everX Flow zu Ihrem neuen **Liebblingsprodukt für alle Restaurationen, die einen starken Kern erfordern**, sowie für **Stumpfaufbau-Präparationen**.



Überragende Bruchfestigkeit für langlebige und umfangreiche Restaurationen

Die meisten Composites bieten perfekte Eigenschaften für den Schmelzersatz: Hohe Verschleißfestigkeit und Ästhetik. Bei der Bruchfestigkeit sind sie Dentin jedoch unterlegen – everX Flow überwindet dieses Problem und verfügt durch seinen **hohen Anteil an kurzen Glasfasern**, die eng mit der Kunststoffmatrix verbunden sind, über eine **ausgezeichnete Bruchfestigkeit, die der von Dentin nahezu gleichkommt**. Dadurch eignet sich das Material in Kombination mit einem konventionellen Composite als Schmelzschicht zur **effizienten Verstärkung großer Seitenzahnrestaurationen**.

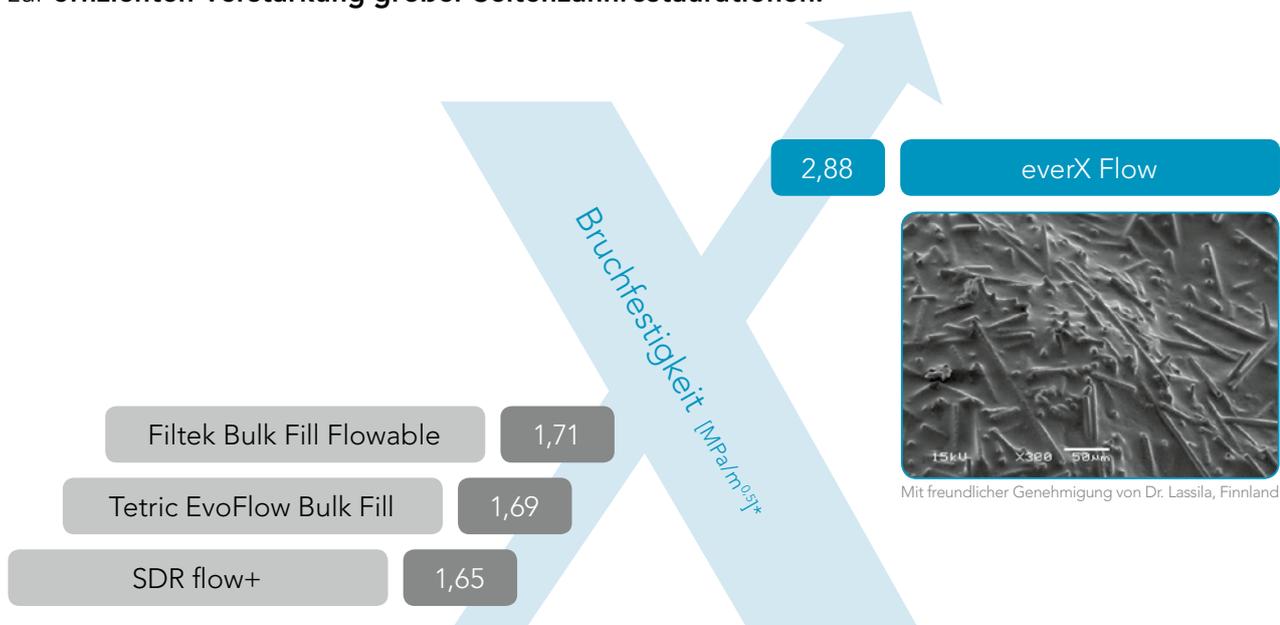

* Quelle: GCC F&E – Daten auf Anfrage erhältlich. Der Test wurde gemäß ASTM E399-90 (1997) durchgeführt.


Perfekte Thixotropie für einfache Applikation und hervorragende Anpassung



Mit freundlicher Genehmigung von Dr Javier Tapia Guadix, Spanien

Dank seiner optimalen Thixotropie **passt sich everX Flow leicht an jede Präparation an** und trägt dazu bei, **Porositäten zu vermeiden**.

Sein kontrolliertes Fließverhalten ermöglicht zudem eine Applikation in den oberen Molaren **ohne Einsacken**.

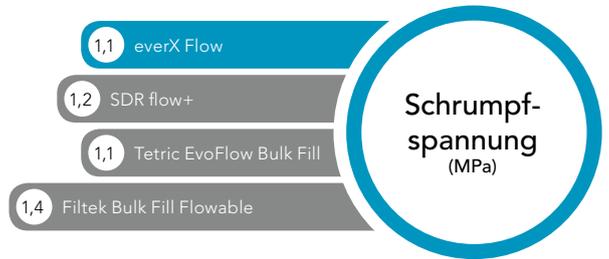

Quelle: GCC F&E – Daten auf Anfrage erhältlich.

Zwei Farbtöne, mit denen Sie sämtlichen Anforderungen gerecht werden können

Bulk-farbe
Aushärtungstiefe 5,5 mm

Hervorragend geeignet für **tiefe Seitenzahnkavitäten**

Dentin-farbe
Aushärtungstiefe 2,0 mm

Bestens für **ästhetischere Ergebnisse** und für **Stumpfaufbauten**

Optimal zur Verstärkung großer Kavitäten und für langanhaltende ästhetische Ergebnisse



Kavitätenpräparation



Applikation von **everX Flow** (Dentinfarbe)



Deckschicht mit **Essentia** (Universalfarbe)



Postoperatives Ergebnis

Mit freundlicher Genehmigung von Georg Benjamin, Deutschland



Kavitätenpräparation



Applikation von **everX Flow** (Bulkfarbe)



Deckschicht mit **G-aenial Universal Injectable** (A3-Farbe)



Postoperatives Ergebnis

Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Lucile Dahan, Frankreich



everX Flow von GC

Überzeugend stabile Struktur



**Bulk-
farbe**
für tiefe
Kavitäten

**Dentin-
farbe**
für hoch-
ästhetische
Ergebnisse



Präparation der Kavität



Bei Klasse-II-Kavitäten werden die fehlenden Wände mit einem konventionellen Composite aufgebaut



Füllung der Kavität mit everX Flow



Endergebnis nach Abdeckung mit konventionellem Composite

everX Flow

012898	everX Flow, Spritze 2 ml (3,7 g) Bulk
012899	everX Flow, Spritze 2 ml (3,7 g) Dentin

Entdecken Sie außerdem



G-Premio BOND
Universal-Haftvermittler



G-ænial Universal Injectable
Hochstabiles, injizierbares
Restaurationsmaterial



Essentia Universal
Universal-Pastencomposite

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND und G-ænial Universal Injectable sind Marken von GC.
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ und Tetric EvoFlow Bulk Fill sind keine Marken von GC.

GC EUROPE N.V.
Zentrale
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel.: +32.16.74.10.00
Fax: +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

GC Germany GmbH
Seifgrundstraße 2
D-61348 Bad Homburg
Tel. +49.61.72.99.59.60
Fax. +49.61.72.99.59.66
info.germany@gc.dental
http://germany.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH
Tallak 124
A-8103 Gratwein-Strassengel
Tel. +43.3124.54020
Fax. +43.3124.54020.40
info.austria@gc.dental
http://austria.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH
Swiss Office
Zürichstrasse 31
CH-6004 Luzern
Tel. +41.41.520.01.78
Fax +41.41.520.01.77
info.switzerland@gc.dental
http://switzerland.gceurope.com

